

XHZ-90S

Fototerapia para la
bilirrubina neonatal



Irradiación intensiva de luz azul, reduce eficazmente la ictericia

Fuente de luz más potente: Utilizando LED SMD, la irradiancia total de bilirrubina puede alcanzar más de $75\mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$, acorde a los requerimientos de la Academia Americana de Pediatría (AAP), lo que puede reducir eficazmente la ictericia y **acortar el tiempo de tratamiento**.

Mayor vida útil: Vida útil del LED >50000 horas, con un consumo reducido de energía.

Mejor longitud de onda: La longitud de onda de irradiación es de 400~550 nm, lo que puede lograr la mejor eficacia de absorción de la bilirrubina y tratar eficazmente la ictericia neonatal.



Gran pantalla táctil de alta definición

Pantalla LCD táctil: Pantalla independiente táctil LCD de 4,3" de con dos modos de temporización, cronómetro y cuenta atrás.
Control PWM para realizar ajuste del brillo de la luz azul.

Temporizador de luz azul: Es conveniente cambiar la fuente de luz a tiempo, por parte del personal médico, para asegurar el efecto de la fototerapia.

Diseño humanizado y flexible

Fácil de ajustar: La altura del equipo puede ajustarse libremente, así como el ángulo de inclinación de la luz de irradiación, proporcionando al personal médico una variedad de opciones de tratamiento clínico.

Estructura estable: Las ruedas pueden bloquearse para garantizar la estabilidad durante el tratamiento.


Adaptable: Puede utilizarse en combinación con otros equipos de cuidado infantil para proporcionar un mejor efecto de tratamiento de la ictericia, como una incubadora.

Configuración estándar

Modelo móvil: Lámpara de irradiación, controlador y soporte móvil.

Modelo fijo: Lámpara de irradiación, controlador y soporte de fijación.

Puede instalarse de forma independiente en una columna, y utiliza rse conjuntamente con otros equipos, como incubadoras, paneles radiantes, etc.

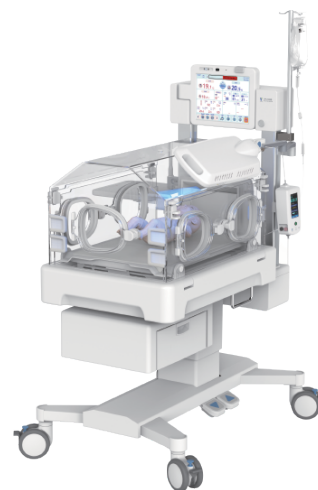

Ningbo David Medical Device Co.,Ltd

Dirección: Bldg No. 5 Ningbo Smart Park, 98 Chuangyuan Rd, Hi-tech Zone, Ningbo, China

C.P.: 315048 Correo electrónico: sales@nbdavid.com

Fax: 0086-574-8780 3714

Las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso para mejora del rendimiento.

Tel: 0086-574-8780 0008 o 8780 0007

Web: www.nbdavid.com/en/

mayo de 2022 Versión nº: 1



Producto importado y distribuido por:



www.sorevan.com


Accede a nuestros catálogos:

ADULTOS



ESCANEA O PINCHA AQUÍ

NEONATOS

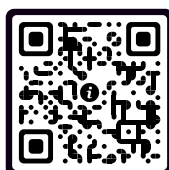

ESCANEA O PINCHA AQUÍ

SERVICIO TÉCNICO



ESCANEA O PINCHA AQUÍ

MEDICAL SOREVAN SL

Puerta de Abajo, 18 28430 Alpedrete, Madrid
T.918 501 058 F. 918 514 824
sorevan@sorevan.com